

## さっと着て帰れるギブスホルダー『bonbone Kitai ウエスト』発売

ギブスホルダー×ウェアで患者さまを快適に

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は患者さまの快適性に着目し、さっと着て帰れるギブスホルダー『bonbone Kitai ウエスト』を病院・クリニック向けに2021年12月6日（月）より発売しました。



医療現場を通して患者様さまの声を元に約40年間サポーター・コルセットを開発し続けてきたメーカーが手掛ける新シリーズ「bonbone Kitai」。あなたが「着たい」と思う気持ちと、あなたの“期待”に寄り添うことで快適な日常生活をサポートします。

1. 最初からしっかり固定できる
2. コルセットを着けているように見えない
3. いつでも清潔



患者さま1人1人に合わせて  
成形したギブスシーネが  
セットできるようになっており  
高い支持力を生み出します

患者さまに合わせてお作りいただけます。

## bonbone Kitai ウエスト 提供までの流れ

ギプスシーネによる固定で患者さまの初診時から  
外固定を行うことができます。

準備

ギプスシーネ作成

成形

装着

モーリング

完成

硬化


いつも使い慣れたギプスシーネ※と専用のギプスホルダーなので、患者さまの体型にフィットした外固定を行うことができます。またウェアをアウターとしているため装着の基準を決めることができ、患者さまが自分で着脱しても装着位置がずれる心配がありません。※ギプスシーネは製品に含まれておりません。

### • bonbone Kitai ウエストの基本構造




### 体を支える2つの仕組み「3点固定」

下記の2つの仕組みで腰椎の動きを制限します。

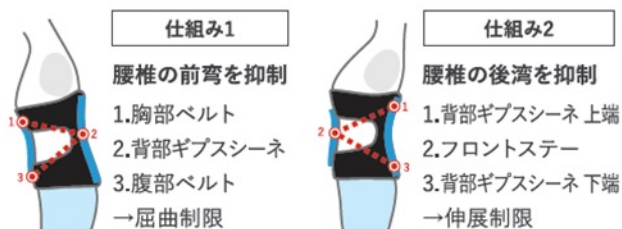

前側には胸部・腹部ベルトを繋ぐようにフロントステーが2本装着されています。フロントステーは面ファスナーによる着脱式でかつ上下・左右の位置調節ができるため、患者さまの体型に合わせたサポートが可能です。

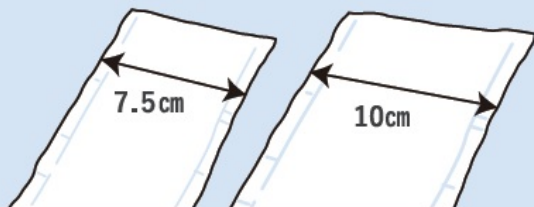

ギプスシーネで幅が7.5cm or 10cmのものをギプスホルダーにセットすることができます。ギプスシーネをセットする際は必ず左右に1枚ずつ、合計2枚セットして使用してください。

### • 患者さまへの2つの安心ポイント

#### 1. 毎回正しい位置に簡単装着

アウターとしてウェアを採用しているため、羽織るだけで正しい位置に装着することができます。



#### 2. 洗濯可能で衛生的



洗い方：  
中性洗剤による手洗い  
※ギプスシーネは  
取り外してください。



洗い方：  
中性洗剤による洗濯機洗い  
※ネットをご使用ください。

- 商品詳細 ※病院・クリニック専用の製品です



■ bonbone Kitai ウエスト

品番	サイズ	胸囲	腸骨周囲	標準価格
001-4802	L	85cm~100cm	80cm~100cm	オープン
001-4803	M	75cm~85cm	71cm~85cm	

〈セット内容〉ウェア:1着 コルセット(ギブスホルダー):1個  
 ※セット内容にギブスシーネは含まれません。

● 開発背景

今までの専用装具は完成までに時間がかかり、患者さまが必要なときにすぐ寄り添う事が難しい場合が多かったです。また、患者さまも専用装具を着用して帰宅後、一度外すと装着しなおす事が難しく、装着できても正しく固定できていない場合があります。『bonbone Kitai ウエスト』は「さっと、着て帰れるギブスホルダー」。本体はギブスシーネを入れられるコルセット型ホルダーになっており、一般的にクリニックで使われているギブスシーネをセットする事が出来ます。また、ウェア構造になっているので羽織るだけで正しい位置に調整して着用出来ます。ギブスシーネを使う事でその場で患者さまに商品を提供する事が出来る為、すぐに寄り添う事ができます。今後は他の部位や、関節専用の「bonbone Kitai」シリーズの展開を進めていきます。

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp/

公式Twitter：https://twitter.com/daiyak\_medical

事業内容：コルセット、サポーター、インソール、テーピング・トレーニング用品など多岐にわたる製品を開発・販売

【お問い合わせ】

ダイヤ工業株式会社

広報担当：藤原

Tel：086-282-1245

Mail：info@daiyak.co.jp

営業時間：平日9：00~17：30

---

ダイヤ工業株式会社のプレスリリース一覧

[https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company\\_id/60537](https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/60537)